

SYSTÈME HYDRO- PULSEUR COMPACT

Des questions ?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord !

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle :

1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Guide d'utilisation et de coiffure Modèle WJ3CSRC

Afin que ce produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours attentivement le livret d'instructions avant de l'utiliser.

www.interplak.com

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

DANGER

- **N'immergez PAS l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.**

MISE EN GARDE

- **Cet appareil requiert une supervision étroite s'il est utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant des incapacités, ou à proximité d'eux.**

- **N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Mode d'emploi

1. Prenez le manche (5) et insérez-y un embout à jet (2) à code de couleur.
2. Retirez le réservoir d'eau (3) en tenant fermement la base de l'appareil d'une main et en soulevant le réservoir de l'autre main.
3. Remplissez-le d'eau, d'eau dentifrice ou de rince-bouche, puis remettez-le fermement en place sur l'appareil.

REMARQUE : Rincez abondamment le réservoir après chaque utilisation avec du rince-bouche ou de l'eau dentifrice ou si l'appareil n'a pas été utilisé depuis quelque temps.

4. Commencez en mettant la commande au réglage le plus faible, afin de permettre aux gencives de s'adapter au nettoyage par jet d'eau.
5. Appuyez sur le bouton PAUSE (6), mettez l'appareil à ON et mettez l'embout à jet dans votre bouche en vous penchant au dessus du lavabo.
6. Relâchez le bouton PAUSE pour que l'eau puisse circuler et réglez la pression à HI/LO (7) de façon que le jet soit de sensation agréable. L'eau prend habituellement plusieurs secondes avant de sortir par l'embout à jet.
7. Maintenez la bouche légèrement ouverte et le coude à la hauteur de la bouche, afin que l'eau puisse s'écouler dans le lavabo.
8. Tournez le manche pour diriger l'embout à jet sur la surface des dents et entre les dents pour ainsi déloger la plaque et les particules coincées. L'eau pulsée masse les gencives tout en nettoyant la bouche entière.

REMARQUE : Pour éviter de blesser les parties sensibles des gencives, ne dirigez pas l'embout à jet directement sur les gencives.

AVERTISSEMENT MÉDICAL


Pour votre sécurité :

- Informez-vous auprès de votre dentiste avant l'utilisation, si vous avez subi une chirurgie buccale ou périodontique au cours des douze derniers mois.
- Lorsque vous commencez un nouveau programme d'hygiène orale, il est possible que vos gencives saignent un peu. Joignez votre dentiste si le saignement est abondant ou s'il persiste après deux semaines d'utilisation.
- Assurez-vous que seul l'embout à jet touche à vos dents et à vos gencives. Toute autre partie de l'appareil qui touche vos dents ou vos gencives pourrait les abîmer.
- Ce produit n'est conçu que pour maintenir une hygiène buccale. N'UTILISEZ PAS ce produit à d'autres fins.
- Tout comme pour tout autre nouveau programme d'hygiène buccale, les personnes qui souffrent de problèmes cardiaques doivent s'adresser à leur médecin avant d'utiliser l'hydropulseur dentaire Interplak® et elles devraient toujours prendre certaines précautions en utilisant tout appareil d'hygiène buccale.
- L'hydropulseur Interplak® by Conair® est un appareil de soins personnels et il est conçu pour un usage domestique seulement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Nettoyage et entretien

Si, en cours d'utilisation, la soupape (9) sur le réservoir d'eau se met à fuir, nettoyez le siège du clapet au besoin. Pour ce faire, il suffit de prendre une tête gicleuse et de dégager le clapet, de nettoyer le siège du clapet, de bien le rincer et de le remettre en place.

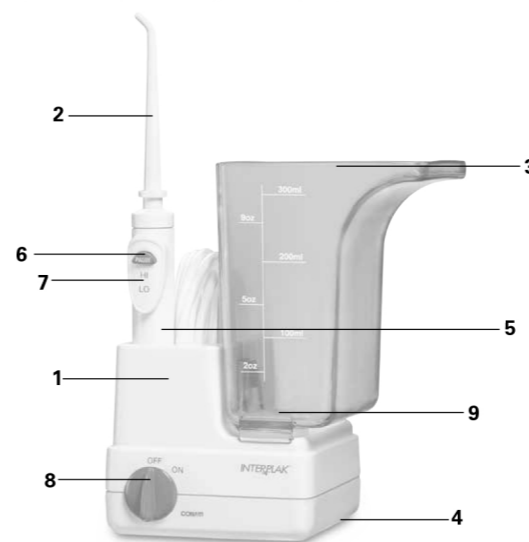


- 1 Appareil
- 2 Embout à jet emboîtable, à code de couleur
- 3 Réservoir
- 4 Couvercle du compartiment à piles (partie inférieure)
- 5 Manche
- 6 Bouton PAUSE
- 7 Commande de pression HI/LO
- 8 Bouton de mise en marche/arrêt
- 9 Siège de soupape (à l'intérieur du réservoir)

Voici une nouvelle solution de soins dentaires à la maison

L'hydropulseur Interplak® by Conair® améliore l'hygiène buccale et contribue grandement à améliorer la santé des gencives lorsque son utilisation fait partie intégrante d'un programme responsable de gestion de la santé bucco-dentaire. Il est particulièrement efficace pour nettoyer autour des appareils orthodontiques, des prothèses partielles fixes et amovibles, des implants et des attelles et produit un massage bénéfique sur les gencives.

Rappelez-vous que l'irrigation buccale est un supplément et non une solution de rechange à vos soins quotidiens d'hygiène buccale. Demandez à votre fournisseur de soins en santé dentaire de vous conseiller sur la façon d'utiliser le plus efficacement possible l'hydropulseur en fonction de vos besoins particuliers.

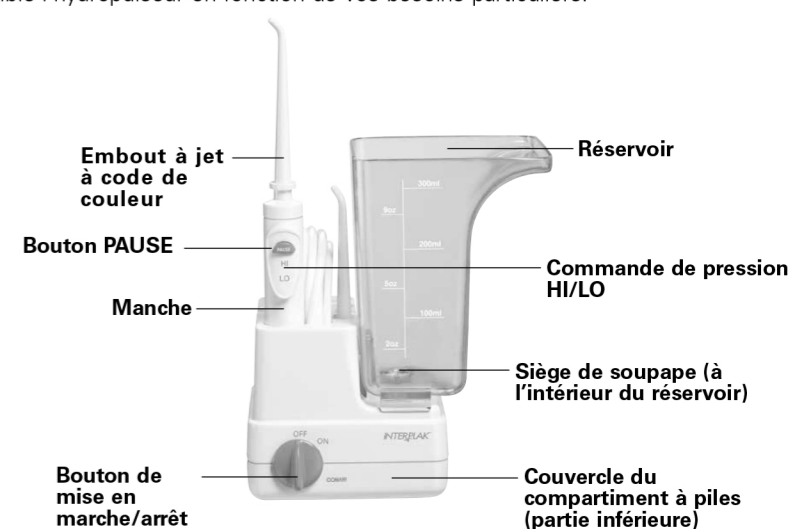

Garantie limitée de 1 an

Conair réparera ou remplacera (à sa discrétion) votre appareil sans frais, si au cours des 12 mois suivant la date d'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour un service au titre de la garantie, renvoyez le produit défectueux au service après-vente ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 5,50 \$ pour les frais de poste et d'administration. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de manufacture.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À PRODUIRE UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE FORTUIT, INDIRECT OU SPÉCIAL QUE CE SOIT POUR BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE, EXPRESSE OU IMPLICITE.

Cette garantie vous confère des droits particuliers et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

© 2015 Conair Consumer Products ULC

Service après-vente

Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway, Woodbridge, ON L4H 0L2
1-855-926-6247

www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels à la clientèle : Consumer_Canada@Conair.com