
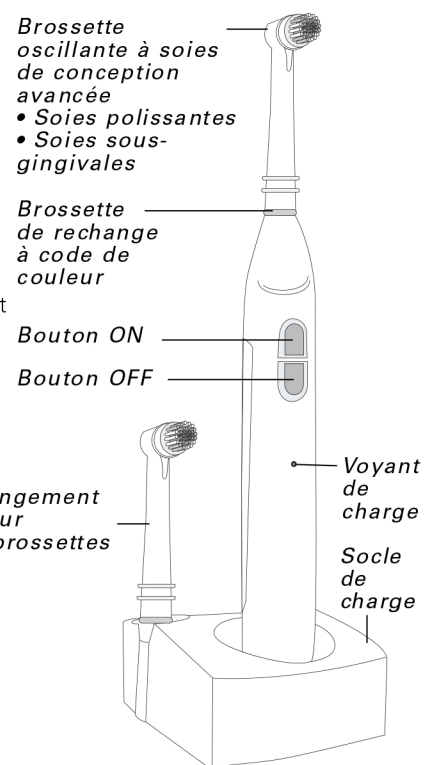


Félicitations pour l'achat de votre appareil enlève-plaque électrique rotatif rechargeable Interplak®

Préparez-vous à vivre une toute nouvelle expérience en matière d'hygiène buccodentaire. L'ingénierie de pointe a créé une brosse à dents avec des soies spécialement conçues pour nettoyer de façon précise.

- Soies sous-gingivales pour nettoyer sous le bord des gencives
- Faisceaux polissants profilés pour lisser la surface des dents



Appuyez sur un seul bouton pour laver vos dents en trois points, de façon sécuritaire et efficace. Interplak vous souhaite un bon et sain brossage!

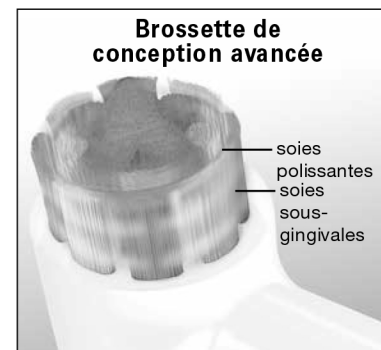

Mise au rebut de la pile

1. Pour enlever la pile et la mettre au rebut ou la recycler, insérez une pièce de monnaie dans les fentes sur le couvercle du compartiment à pile et tournez la pièce dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de dégager le couvercle.
2. Cognez fermement le dessous du manche sur une surface dure afin d'en dégager la pile.
3. Maintenant que la pile est à la vue, vous pouvez retirer les capuchons de connexion. Tenez soigneusement les fils de chaque côté des capuchons et coupez soigneusement les fils. Les piles seront ainsi dégagées et vous pourrez les retirer de l'intérieur du boîtier. Allez porter les piles au centre de tri le plus près de chez vous ou composez le numéro sans frais 1-800-8-BATTERY de la SRPRC pour obtenir de l'information. La SRPRC est une marque de commerce de la Société de recyclage des piles rechargeables au Canada. Ne les JETEZ PAS dans les ordures ménagères municipales.

CONTIENT DES PILES AU NICKEL-MÉTAL-HYDRURE. DOIT ÊTRE COLLECTÉE, RECYCLÉE ET JETÉE ADÉQUATEMENT NE PAS JETER LA PILE DANS LES ORDURES MUNICIPALES.

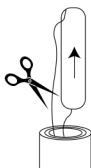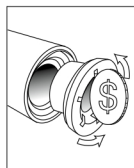

Pour obtenir plus d'information sur le remplacement de la pile de votre brosse à dents électrique, composez le 1-855-926-6247 (9 h à 16 h 30, heure normale de l'Est, du lundi au vendredi).



Tous les 6 mois, déchargez complètement le manche électrique, puis rechargez-le afin d'optimiser la durée de vie de la pile rechargeable.

Pour contribuer à la protection de l'environnement, ce produit fonctionne avec une pile rechargeable au nickel-métal-hydrure.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, veillez à prendre quelques précautions élémentaires dont les suivantes :

DANGER
Pour réduire tout risque de décharge électrique :

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

- NE MANIPULEZ PAS la fiche si vous avez les mains mouillées.
- NE METTEZ PAS ou ne rangez pas le socle de charge dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire, un évier ou une toilette ou à partir desquels il pourrait être accessible.
- NE SAISISSEZ PAS un appareil qui est tombé dans l'eau; débranchez-le immédiatement. Ne le saisissez pas dans l'eau en aucun cas. Faites-le examiner par un centre de service autorisé s'il est tombé dans l'eau.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé sur une prise de 120 volts CA et 60 Hz. Ne rentrez jamais la fiche de force dans la prise murale.
- N'IMMERGEZ PAS l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

- Close Cet appareil requiert une supervision étroite s'il est utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant des incapacités, ou à proximité d'eux.
- Ne l'utilisez jamais si vous êtes en état de somnolence ou pendant que vous prenez un bain.
- Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il a été immergé dans l'eau. Adressez-vous à un centre de service autorisé pour toute réparation.
- Si le cordon est abîmé, jetez l'appareil car le cordon ne peut pas être remplacé.
- NE PLIEZ PAS le cordon de façon excessive et ne le tirez pas brusquement. Débranchez le cordon en saisissant la fiche, NON LE CORDON.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.

MISE EN GARDE
Pour réduire les risques de brûlure, de décharge électrique, de feu ou de blessure

- Ce produit n'est conçu que pour laver les dents et à aucune autre fin.
- Pour éviter que les soies abîmées ne cassent pendant que l'appareil est en marche, remplacez votre brosse si les soies sont usées ou pliées.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT MÉDICAL

Pour votre sécurité :

MISE EN GARDE

Toute modification ou tout changement apporté à cet appareil, qui n'a pas été expressément approuvé par Interplak, annulera la garantie.

Toute réparation ou tout entretien devrait toujours être effectué par un centre de service autorisé.

- Informez-vous auprès de votre dentiste avant l'utilisation, si vous avez subi une chirurgie buccale au cours des douze derniers mois.
- Lorsque vous commencez un nouveau programme d'hygiène orale, il est possible que vos gencives saignent un peu. Joignez votre dentiste si le saignement est abondant ou s'il persiste après deux semaines d'utilisation.
- Assurez-vous que seule les soies touchent à vos dents et à vos gencives. Toute autre partie de l'appareil qui touche vos dents ou vos gencives pourrait les abîmer.
- Ce produit n'est conçu que pour maintenir une hygiène buccale. N'UTILISEZ PAS ce produit à d'autres fins.
- Tout comme pour tout autre nouveau programme d'hygiène buccale, les personnes qui souffrent de problèmes cardiaques doivent s'informer auprès de leur médecin avant d'utiliser le RTG3XCSR et elles devraient toujours prendre certaines précautions en utilisant tout appareil d'hygiène buccale.
- Évitez d'utiliser une brosse dont les soies sont écrasées ou pliées. Les soies abîmées risquent de briser pendant que l'appareil est en marche. Pour éviter que cela ne se produise, remplacez votre brosse tous les trois à quatre mois ou avant, si les soies deviennent usées ou pliées.
- Le RTG3XCSR est un appareil de soins personnels et il est conçu pour un usage domestique seulement.

Remplacement de la brosse de la brosse électrique

Les dentistes recommandent de remplacer votre brosse à dents tous les 3 à 4 mois et ceci s'applique également aux brossettes de votre enlève-plaque électrique rechargeable Interplak®. Vous trouverez des emballages de 2 brossettes modèle RBG3 chez le même détaillant où vous avez acheté votre brosse à dents électrique. Vous pouvez également trouver ces brossettes de recharge dans la plupart des pharmacies, magasins de rabais ou à rayons ou magasins d'alimentation, dans le rayon des produits de soins buccaux. Si vous avez de la difficulté à trouver des brossettes de recharge, n'hésitez pas à nous joindre au 1-855-926-6247 ou visitez notre site à l'adresse www.interplak.com.

Caractéristiques du produit

Tension : 120 volts CA
Puissance : 3W
Hertz : 60 Hz
Pile : pile rechargeable au nickel-métal-hydrure de type AAA (Le remplacement avec un autre type de pile pourrait causer une explosion)
Poids : 230 grammes

Préparation initiale


Avant la première utilisation, vous devez faire charger le manche électrique pendant 24 heures. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Off sur le manche et posez le manche sur le socle de charge. Le voyant de mise en marche s'illuminera.

REMARQUE : Assurez-vous que la prise électrique fonctionne. Vérifiez-la en y branchant un autre appareil. Vérifiez également le bouton de remise à zéro sur la prise électrique ou prise murale.

Environ deux fois par année, mettez la charge du manche complètement à plat, puis rechargez le manche afin d'optimiser la durée de vie de la pile rechargeable.


Mode d'emploi 5 étapes simples

1. **Fixez la brosse en place.**
Une fois que l'appareil a été pleinement chargé, saisissez la brosse par la base et insérez la tige du manche électrique dans l'extrémité creuse de la brosse: (A) insérez la brosse et (B) tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit fixée en place. Pour enlever la brosse, saisissez-la par la base (et non par les soies), puis tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en la soulevant. REMARQUE : Il est recommandé de remplacer votre brosse tous les trois à quatre mois ou avant, si les soies deviennent usées ou pliées.
2. **Humectez les soies.**
Tenez la brosse à l'eau courante pendant quelques secondes.
3. **Étalez le dentifrice uniformément et mettez la brosse dans votre bouche.**
4. **Mettez l'appareil en marche.** Appuyez sur le bouton On.
5. **Posez la brosse correctement sur les dents.**
Mettez les soies perpendiculaires à la surface plate des dents et dirigez l'appareil lentement sur la partie extérieure des dents, puis sur la partie intérieure et en dernier lieu, sur la pointe des dents. Vous n'avez pas à peser fort.

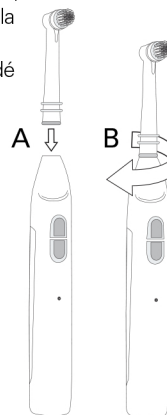

Nettoyage et entretien de l'appareil

1. Après chaque utilisation
Pendant que la brosse à dents est en marche, passez la brosse à l'eau courante pendant quelques secondes.
2. Éteignez l'appareil.
Appuyez sur le bouton Off.
3. Essuyez le manche électrique.
Posez le manche sur le socle de charge branché pour qu'il maintienne sa pleine charge.
4. Entretien de la brosse
Une fois par semaine ou si le manche électrique semble ralentir, mettez-le en marche et versez une petite quantité de rince-bouche sur la brosse.

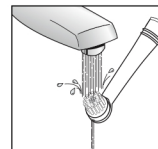

Nettoyage tête de brosse

INTERPLAK®

par CONAIR®

ENLÈVE-PLAQUE ÉLECTRIQUE RECHARGEABLE OPTICLEAN™

Des questions ?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord !

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle :
1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca



Guide d'utilisation et de coiffure Modèle RTG3XCSR

Afin que ce produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours attentivement le livret d'instructions avant de l'utiliser.

www.interplak.com

15CN018442

IB-14174