

1. Brancher le cordon dans une prise à courant alternatif de 120 V.

REMARQUE : Lorsque l'appareil est branché sur l'alimentation principale, toutes les lumières clignotent une fois. Cela indique que le contrôleur fonctionne correctement.

2. Appuyer sur le bouton ON/OFF. Le témoin lumineux s'allumera pour indiquer que le coussin chauffant est au réglage Faible. Appuyer sur les boutons de réglage pour choisir le niveau (chaleur faible, moyenne ou élevée).


3. Choisir le réglage de la chaleur. Placer le coussin chauffant sur la zone à traiter.

4. Lorsque le traitement est terminé, appuyer sur le bouton ON/OFF pour éteindre le coussin et le débrancher. Pour un bienfait optimal, ne pas utiliser plus de 30 minutes à la fois.

REMARQUE : L'élément chauffant s'éteindra automatiquement après 60 minutes, puis le témoin vert à DEL clignotera continuellement jusqu'à ce que le bouton MARCHÉ/ARRÊT soit enfoncé.

Les deux côtés du coussin n'ont pas la même épaisseur. Le côté plus épais est adapté aux peaux sensibles et offre une chaleur diffuse. Le côté plus mince offre une chaleur plus intense.

Des brûlures peuvent se produire, peu importe le réglage. Vérifier fréquemment la peau sous le coussin.

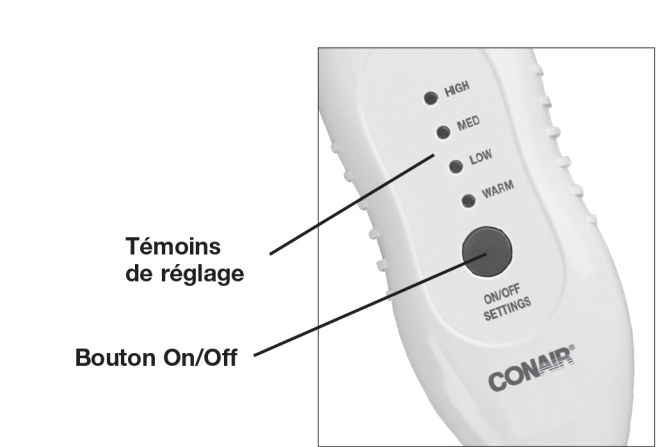

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES NE PAS DÉTRUIRE


DANGER – Pour réduire le risque de brûlure, de choc électrique et d'incendie, ce produit doit être utilisé conformément aux consignes suivantes :

1. LIRE TOUTES LES CONSIGNES.
2. TOUJOURS DÉBRANCHER LE COUSSIN IMMÉDIATEMENT APRÈS SON UTILISATION.
3. NE PAS UTILISER EN DORMANT. ÉVITER DE TOMBER ENDORMI EN UTILISANT CE PRODUIT.
4. NE PAS UTILISER SUR UN ENFANT OU UN ANIMAL.
5. CE COUSSIN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR OU SUR DES PERSONNES ENDORMIES OU INCONSCIENTES, DES PERSONNES SOUFFRANT DE CERTAINS HANDICAPS OU AYANT UNE MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE, À MOINS D'UNE SURVEILLANCE TRÈS ATTENTIVE.
6. NE PAS UTILISER SUR UNE PEAU SENSIBLE.
7. DES BRÛLURES PEUVENT SE PRODUIRE, PEU

TRAITEMENT THERMIQUE HUMIDE

1. S'assurer que le coussin chauffant est débranché.
2. Mouiller l'éponge absorbante et essorer l'excédent d'eau.
3. Insérer l'éponge humide entre le coussin chauffant et la housse en tissu.
4. Brancher le cordon dans une prise à courant alternatif de 120 V.
5. Appuyez sur le bouton ON/OFF; le témoin lumineux s'allumera pour indiquer que le coussin chauffant est au réglage Faible. Appuyer sur les boutons de réglage pour choisir le niveau (chaleur faible, moyenne ou élevée).
6. Placer le coussin chauffant sur la zone à traiter.
7. Lorsque le traitement est terminé, appuyer sur le bouton ON/OFF pour éteindre le coussin et le débrancher. Pour un bienfait optimal, ne pas utiliser plus de 30 minutes à la fois.
8. Après l'utilisation, sécher la housse en tissu, l'éponge absorbante et le coussin chauffant avant de les ranger.

Remarque : ce coussin chauffant possède une fonction d'arrêt automatique après 60 minutes. Pendant l'utilisation, vérifier fréquemment la peau sous le coussin chauffant. Ne pas laisser le coussin chauffant sans surveillance. Après l'utilisation, sécher la housse en tissu, l'éponge absorbante et le coussin chauffant avant de les ranger.

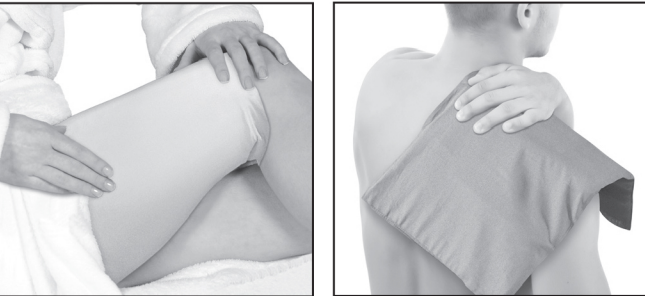

RESTRICTIONS D'UTILISATION DU COUSSIN CHAUFFANT

Pour plus de précautions, veuillez consulter les sections Importantes consignes de sécurité et Précautions.



Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.



Ne l'utilisez pas sous des couvertures.



Ne dormez pas en utilisant la compresse chauffante.



Ne vous assoyez pas sur la compresse chauffante.



Ne comprimez pas la compresse chauffante.



Ne la pliez pas fermement.

16. NE PAS UTILISER CE COUSSIN AVEC UN LINIMENT, UN BAUME OU UN ONGUENT CONTENANT DES INGRÉDIENTS PRODUISANT DE LA CHALEUR, CAR CELA POURRAIT CAUSER DES BRÛLURES. APPLIQUER À L'ENDROIT DÉSIRÉ POUR PROCURER CHALEUR ET CONFORT OU À L'ENDROIT RECOMMANDÉ PAR LE MÉDECIN OU LE DENTISTE POUR SOULAGER LA DOULEUR.
17. NE PAS ENROULER LE CORDON TROP SERRÉ AU MOMENT DE RANGER LE COUSSIN POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LE CORDON ET DES PIÈCES INTERNES.
18. GARDER LE COUSSIN LOIN DES SURFACES CHAUFFÉES.
19. PLACER LE COUSSIN SUR LA PARTIE DU CORPS À RÉCHAUFFER ET NON EN DESSOUS.
20. NE PAS PLACER CE COUSSIN DANS LE MICRO-ONDES.
21. NE PAS LAISSER LE COUSSIN SANS SURVEILLANCE EN PRÉSENCE D'ENFANTS.
22. NE PAS UTILISER DE COUSSIN SOUS UN COUVRE-LIT OU TOUT AUTRE TYPE DE COUVERTURE. NE PAS COUVRIR LE COUSSIN AVEC DES DRAPS OU DES COUVERTURES. SEULE LA HOUSSE EN TISSU FOURNIE DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC LE COUSSIN.
23. NE PAS UTILISER LE COUSSIN SUR LA PEAU SENSIBLE OU SI VOUS PRENEZ DES

MÉDICAMENTS QUI PEUVENT RENDRE LA PEAU SENSIBLE.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

ÉLÉMENTS DU COUSSIN CHAUFFANT

- Housse en tissu lavable à la machine (Figure 1)
- Coussin chauffant (Figure 2)
- Tissu intérieur résistant à la chaleur humide (Figure 3)



Fig. 1

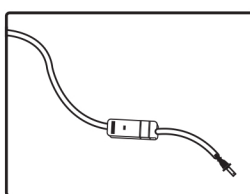


Fig. 2

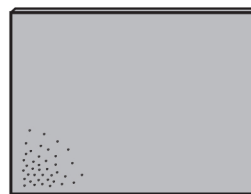


Fig. 3

MISES EN GARDE :

L'étui en tissu doit toujours être utilisé avec la compresse chauffante.

- Cette compresse chauffante ne doit pas être utilisée dans les cas suivants : si vous souffrez de diabète, de tuberculose, de tumeurs bénignes ou malignes, d'une phlébite ou d'une thrombose, si vous avez des hémorragies, des inflammations de la peau, un douleur indéterminée aux mollets ou à des jointures ou si votre circulation sanguine est mauvaise. Consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil si vous avez une infection fongique, une enflure, une fracture ou une douleur persistante.
- Consultez votre médecin si vous avez des questions concernant l'utilisation de la compresse chauffante à des fins thérapeutiques.
- **Ne l'utilisez pas sur toute douleur inexpliquée, sur tout muscle endolori ou à la suite d'une blessure musculaire grave, avant d'avoir préalablement consulté votre médecin.**
- Gardez-la hors de la portée des enfants.
- **Cessez d'utiliser le produit si la douleur augmente ou s'il y a enflure après l'application.**
- N'utilisez pas la compresse dans le bain ou sous la douche. Ne l'utilisez que dans un endroit sec.
- Consultez votre médecin avant d'utiliser la compresse si vous souffrez d'une maladie ou avez des troubles médicaux incluant, notamment, le recours à un stimulateur cardiaque, une grossesse ou un cancer.
- Cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin si vous éprouvez de la douleur à un muscle ou à une articulation pendant une période prolongée. Une douleur persistante pourrait être un symptôme d'un problème plus sérieux.
- N'utilisez jamais un produit chauffant sur une plaie ouverte, une peau marbrée ou toute partie du corps qui est enflée, brûlée, contusionnée, irritée ou sur une éruption cutanée, une plaie ulcérée ou des varices.
- Ce produit ne doit jamais être utilisé par des personnes souffrant de malaises qui pourraient limiter ou même empêcher l'utilisateur de ressentir ou d'éprouver une sensation à l'endroit sur le corps où le produit est utilisé.
- L'utilisation de ce produit est censée être plaisante et agréable. En cas de douleur ou d'inconfort, cessez l'utilisation et consultez votre médecin.

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS (ÉTATS-UNIS ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 36 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présente garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso). À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 36 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE APPLICATION PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 36 MOIS DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE.

CONAIR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE.

Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

SERVICE APRÈS-VENTE :
Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON L4H 0L2

Pour en savoir plus sur les produits Conair composez le : 1-855-926-6247
Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle : Consumer_Canada@Conair.com

©2021 Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway, Woodbridge, ON L4H 0L2

IB-17370

21CN079841

ASSEMBLAGE

Pour assembler le coussin chauffant, l'insérer complètement dans la housse en tissu en laissant le cordon à l'extérieur (voir ci-dessous). Pour fixer dans la position souhaitée, attacher une extrémité de la sangle réglable à la housse. Placer le coussin à l'endroit désiré, enrouler la sangle et attacher l'extrémité libre à la housse.

Ajuster au besoin. Pour obtenir une chaleur humide, suivre les consignes de la section Traitement thermique humide.

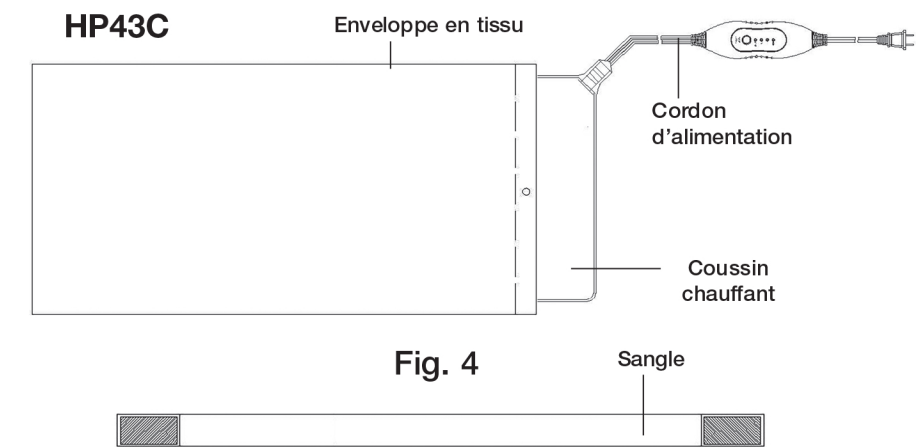


Fig. 4

CONAIRcomfort^{MC} coussin chauffant grand format de luxe



mode d'emploi
pour tous les modèle HP43C

DES QUESTIONS?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

APPELEZ-NOUS D'ABORD!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à **TOUTES** vos questions. Veuillez composer le **NUMÉRO SANS FRAIS** de notre Service à la clientèle :

1-855-926-6247 Ou visitez notre site Internet au **www.conaircanada.ca**

Pour votre sécurité et un usage prolongé du produit, lisez toujours le livret d'instructions avant l'utilisation.

CONSIGNES D'UTILISATION

TRAITEMENT THERMIQUE SEC

Ce coussin chauffant est préassemblé (Figure 4).

Ce produit possède une fiche polarisée (l'une des broches est plus grande que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche se branche sur une prise polarisée dans un sens seulement.

Si la fiche ne se branche pas entièrement sur la prise, inverser la fiche. Si elle ne se branche toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne jamais tenter de contourner cette mesure de sécurité. Ce coussin chauffant est conçu pour un usage domestique seulement et pour fonctionner sur une prise à courant alternatif de 110-125 volts. Utiliser sur une prise à courant alternatif (60 hertz) seulement.