


CEINTURE LOMBAIRE D'ACUPRESSION ET DE MASSAGE PAR VIBRATIONS

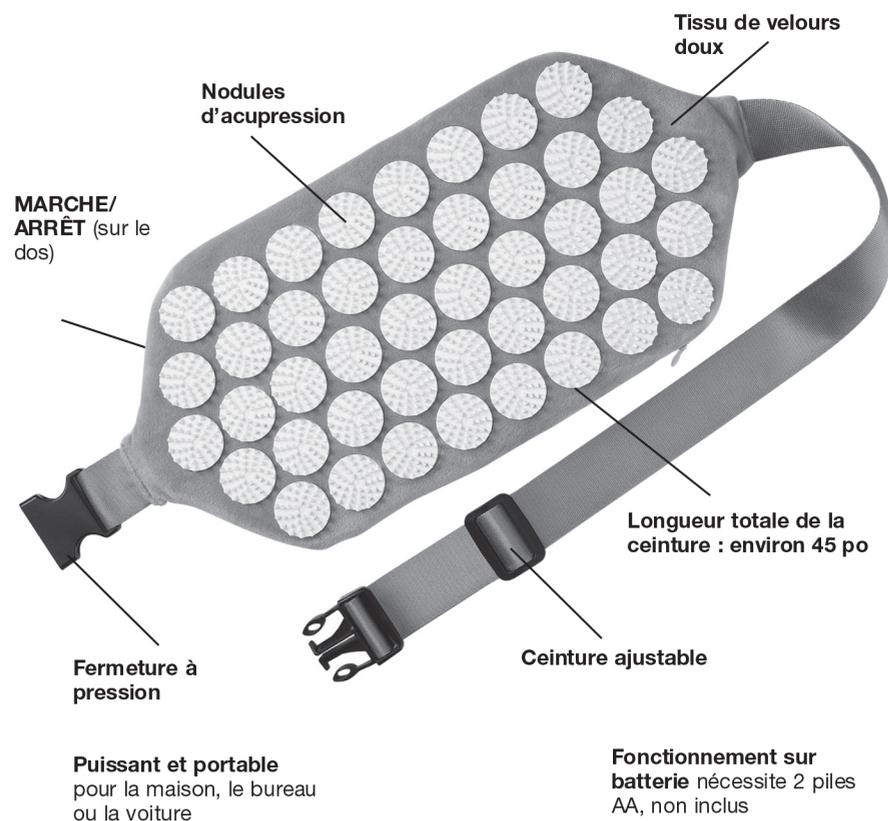

GARANTIE LIMITÉE D' UN AN

Conair (à sa discrétion) réparera ou remplacera un appareil sans frais s'il faut défaut suite à un vice de matière ou de fabrication au cours des 12 mois suivants la date d'achat. Pour obtenir un service au titre de la présente garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso). À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, FORTUIT OU INDIRECT QUE CE SOIT POUR LE MANQUE À CETTE GARANTIE OU TOUTE AUTRE, EXPRESSE OU IMPLICITE.

Pour obtenir un service, veuillez présenter ou envoyer l'appareil défectueux, avec le bon de caisse, à l'adresse suivante.

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

SERVICE APRÈS-VENTE :
Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON L4H 0L2

BM15C
Pour en savoir plus sur les produits Conair composez le : 1-855-926-6247
Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle : Consumer_Canada@Conair.com

©2021 Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway, Woodbridge, ON L4H 0L2

IB-17314

21CN078956



BODY BENEFITS PAR CONAIR®

CEINTURE LOMBAIRE D'ACUPRESSION ET DE MASSAGE PAR VIBRATIONS



DES QUESTIONS?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

APPELEZ-NOUS D'ABORD!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à **TOUTES** vos questions.

Veuillez composer le **NUMÉRO SANS FRAIS** de notre Service à la clientèle :

1-855-926-6247 Ou visitez notre site Internet au **www.conaircanada.ca**

MODÈLE BM15C MANUEL D'UTILISATION

Pour votre sécurité et un usage prolongé du produit, lisez toujours le livret d'instructions avant l'utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'un appareil électrique demande la prise de précautions élémentaires, dont les suivantes.

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

ATTENTION – Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc ou de blessure:

- 1) N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche
- 2) Ne l'utilisez pas sous une couverture ou un oreiller. La chaleur excessive pourrait causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- 3) Cet appareil de massage n'est pas destiné à être utilisé par ou sur des enfants ou des personnes qui ont certaines incapacités ni à proximité d'eux.
- 4) N'utilisez l'appareil que tel qu'indiqué dans ce manuel.
- 5) Gardez l'appareil loin des surfaces chaudes.
- 6) N'insérez ni n'échappez aucun objet dans les ouvertures
- 7) Pour débrancher l'appareil, mettez tous les boutons de commande à la position ARRÊT, puis débranchez-le de la prise
- 8) Ne pas utiliser l'appareil au lit.
- 9) L'appareil ne doit jamais demeurer en marche pendant votre sommeil.
- 10) **Ne jamais utiliser cet appareil s'il est endommagé, si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé pour un examen ou une réparation.**
- 11) N'utilisez pas l'appareil près d'objets tranchants pour éviter de le percer.
- 12) **MISE EN GARDE : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.** Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas utiliser comme oreiller pour un bébé ou un enfant. Ne pas ouvrir l'appareil de massage pour quelque raison que ce soit. Si l'appareil de massage est endommagé ou ouvert, le jeter immédiatement, hors de la portée des enfants.
- 13) Cet appareil de massage consiste en une ceinture lombaire équipée de nodules de plastique, qui peuvent s'avérer tranchants d'un côté. Gardez-le hors de la portée des enfants et des animaux. Manipuler avec prudence.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

À propos de cet appareil de massage

Votre ceinture lombaire aide à stimuler l'énergie du corps. Elle peut être utilisée pour atténuer les tensions et favoriser une relaxation profonde. Vous pouvez utiliser la ceinture avec ou sans la fonction de vibration.

MODE D'EMPLOI

Insertion des piles

Vous devez insérer 2 piles AA (non comprises) dans votre appareil de massage avant de l'utiliser. Ouvrez la fermeture éclair pour accéder au compartiment à piles. Insérez les piles. Faites correspondre les bornes positives (+) et négatives (-) comme indiqué dans le compartiment à piles. Refermer la fermeture éclair.

Placez l'appareil de massage sur la zone à traiter. Vous pouvez vous asseoir dans une chaise ou un sofa lorsque vous portez l'appareil, mais ne vous assoyez jamais sur l'appareil, car cela pourrait causer un dysfonctionnement.

Pour activer le massage par vibration, appuyez simplement sur le bouton MARCHE/ARRÊT à l'arrière de la courroie. (Mettez le bouton est en position ARRÊT pour utiliser la ceinture sans vibrations.) Vous pouvez utiliser la fonction de vibrations pendant une période maximale de 20 minutes. Au début, il peut être préférable d'installer la ceinture lombaire au-dessus des vêtements. Une fois que votre corps sera habitué aux nodules, vous pourrez utiliser la ceinture directement sur la peau. Placez la ceinture avec les nodules orientés vers le corps

CONSIGNES D'UTILISATION DES PILES

- Toujours acheter des piles de la taille et du type qui convient le mieux à l'utilisation prévue.
- Remplacer toutes les piles en même temps.
- Ne pas mélanger les piles neuves et les piles usagées. Ne pas mélanger les piles alcalines, les piles standard (carbone-zinc) et les piles rechargeables (nickel-cadmium).
- Nettoyez les bornes des piles et de l'appareil avant de les insérer.
- S'assurer que les piles sont installées de façon à respecter la polarité (+ et -).
- Retirer les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Retirez les piles usagées rapidement.
- Enlever les piles si la fonction de massage est inutilisée plus de quelques jours.

ÉLIMINATION DES PILES

Jeter les piles usagées conformément à la réglementation en vigueur. Les piles doivent être acheminées à un endroit désigné à cet effet afin d'être recyclées de façon sécuritaire et sans risque pour l'environnement. Ne pas brûler ni enterrer les piles.

PRÉCAUTIONS

- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : tuberculose, tumeurs bénignes ou malignes, hémorragies, inflammations cutanées, phlébite ou thrombose, plaies ouvertes ou récentes, ecchymoses, fracture de la peau ou varices, douleurs aux mollets ou articulaires d'origine inconnue, ou sensibilité à la chaleur.
- **Consultez votre médecin si vous avez des questions concernant l'utilisation thérapeutique de cet appareil de massage. L'utilisation de cet appareil est uniquement aux risques de l'utilisateur, et Conair Corporation n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou blessure.**
- Si vous êtes enceinte, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Ne pas utiliser sur toute douleur inconnue, sur des muscles enflés ou à la suite d'une blessure musculaire grave avant d'avoir consulté un médecin.
- Garder hors de la portée des enfants.
- Cessez d'utiliser l'appareil de massage en cas d'aggravation de la douleur ou d'apparition d'un gonflement.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

- 1) Ranger l'appareil de massage en lieu sûr, loin de toute chaleur excessive ou de tout objet pointu. Retirer les piles si la fonction de vibration est inutilisée plus de quelques jours
- 2) Pour nettoyer l'appareil, enlever les piles, puis essuyer l'appareil avec un chiffon. Ne pas utiliser de nettoyants chimiques puissants, comme la benzine.

DURÉE RECOMMANDÉE DE MASSAGE

En général, un massage devrait durer de 15 à 20 minutes sur les muscles du corps. Vous pouvez effectuer le massage une ou deux fois par jour.

Comme le métabolisme de chaque personne diffère, il en est de même pour la réaction à un massage et vous saurez vite adapter la durée à vos besoins personnels. Si vous avez des doutes concernant le traitement, consultez votre médecin.