

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

NE PAS DÉTRUIRE

DANGER — Pour réduire le risque de brûlure, de choc électrique et d'incendie, ce produit doit être utilisé conformément aux consignes suivantes :

1. LIRE TOUTES LES CONSIGNES.
2. **TOUJOURS DÉBRANCHER LE COUSSIN IMMÉDIATEMENT APRÈS SON UTILISATION.**
3. NE PAS UTILISER EN DORMANT. ÉVITER DE TOMBER ENDORMI EN UTILISANT CE PRODUIT.
4. NE PAS UTILISER SUR UN ENFANT OU UN ANIMAL.
5. CE COUSSIN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR OU SUR DES PERSONNES ENDORMIES OU INCONSCIENTES, DES PERSONNES SOUFFRANT DE CERTAINS HANDICAPS OU AYANT UNE MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE, À MOINS D'UNE SURVEILLANCE TRÈS ATTENTIVE.
6. NE PAS UTILISER SUR UNE PEAU SENSIBLE.
7. DES BRÛLURES PEUVENT SE PRODUIRE, PEU IMPORTE LE RÉGLAGE. VÉRIFIER FRÉQUEMMENT LA PEAU SOUS LE COUSSIN.
8. NE JAMAIS UTILISER LE COUSSIN SANS L'AVOIR PLACÉ DANS LA HOUSSE AMOVIBLE.
9. Ne pas utiliser dans un endroit où de l'oxygène est administré.
10. **NE PAS UTILISER D'ÉPINGLES OU TOUT AUTRE OBJET MÉTALLIQUE POUR MAINTENIR LE COUSSIN EN PLACE.**
11. **NE PAS S'ASSEOIR SUR LE COUSSIN OU L'ÉCRASER. ÉVITER DE LE PLIER EN LE PRESSANT.**
12. **NE JAMAIS TIRER LE COUSSIN PAR SON CORDON D'ALIMENTATION.**
13. **NE PAS UTILISER LE CORDON COMME POIGNÉE.**
14. EXAMINER ATTENTIVEMENT L'INTÉRIEUR DE LA HOUSSE ET LE CORDON

D'ALIMENTATION AVANT CHAQUE UTILISATION. JETER LE COUSSIN SI L'INTÉRIEUR DE LA HOUSSE OU LE CORDON D'ALIMENTATION MONTRE DES SIGNES DE DÉTÉRIORATION.

15. Ne pas modifier le coussin d'aucune façon. Aucune pièce ne peut être changée par l'utilisateur. Si, pour quelque raison que ce soit, le coussin ne fonctionne pas de façon satisfaisante, le retourner au Service après-vente à l'adresse indiquée.
16. Ne pas utiliser ce coussin avec un liniment, un baume ou un onguent contenant des ingrédients produisant de la chaleur, car cela pourrait causer des brûlures. Appliquer à l'endroit désiré pour procurer chaleur et confort ou à l'endroit recommandé par le médecin ou le dentiste pour soulager la douleur.
17. **NE PAS ENROULER LE CORDON TROP SERRÉ AU MOMENT DE RANGER LE COUSSIN POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LE CORDON ET DES PIÈCES INTERNES.**
18. Garder le coussin loin des surfaces chauffées.
19. Placer le coussin sur la partie du corps à réchauffer et non en dessous.
20. Ne pas placer ce coussin dans le micro-ondes.
21. Ne pas laisser le coussin sans surveillance en présence d'enfants.
22. Ne pas utiliser de coussin sous un couvre-lit ou tout autre type de couverture. Ne pas couvrir le coussin avec des draps ou des couvertures. Seule la housse en tissu fournie doit être utilisée avec le coussin.
23. Ne pas utiliser le coussin sur la peau sensible ou si vous prenez des médicaments qui peuvent rendre la peau sensible.
24. Des températures assez élevées pour causer des brûlures pourraient découler d'une utilisation inappropriée du coussin, peu importe le réglage. Vérifier fréquemment la peau du patient à l'endroit où le coussin est déposé dans le cas d'un contact direct.
25. S'assurer de brancher le coussin uniquement sur un circuit standard de 120 V.
26. Conserver ce coussin chauffant au sec. Ne pas l'utiliser dans un environnement humide ou mouillé.
27. Examiner avec soin la housse résistante à l'humidité chaque fois que l'appareil est en marche. Ne pas utiliser le coussin si la housse présente des signes de détérioration (comme des fendillements, des fissures et des boursouffures),

28. Ne pas laisser le coussin branché à un circuit électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

29. Conserver le coussin dans un endroit frais, sec et sombre – préféablement dans l'emballage original – lorsqu'il n'est pas utilisé.

30. Ce coussin n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant toucher à l'appareil, ni jouer avec celui-ci.

CONSERVER CES CONSIGNES

ÉLÉMENTS DU COUSSIN CHAUFFANT

- Housse en tissu lavable à la machine (Figure 1)
- Coussin chauffant (Figure 2)
- Éponge absorbante (Figure 3)



Figure 1

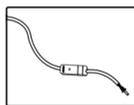


Figure 2



Figure 3

Précautions :

- CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
- Toujours utiliser la housse en tissu avec le coussin chauffant. Une éponge absorbante est fournie pour les traitements thermiques humides.
- Ce coussin chauffant ne doit pas être utilisé dans les situations suivantes : sur une personne souffrant de diabète, de tuberculose, de tumeurs bénignes ou malignes, de phlébite et de thrombose, d'hémorragies, d'inflammation cutanée, de douleurs aux mollets ou articulaires d'origine inconnue ou d'une mauvaise circulation sanguine. Consulter un médecin avant d'utiliser ce produit en présence d'infection fongique, d'enflure, de fracture ou de douleur persistante.
- **Consulter un médecin pour toute question thérapeutique concernant l'utilisation de ce coussin chauffant.**
- Ne pas utiliser sur toute douleur inconnue, sur des muscles enflés ou à la suite d'une blessure musculaire grave avant d'avoir consulté un médecin.

• **Garder hors de la portée des enfants.**

• Cesser l'utilisation de ce produit si la douleur augmente ou si une enflure survient après l'application.

• Ne pas utiliser dans le bain ou sous la douche. Utiliser seulement dans un endroit sec.

• Les personnes souffrant d'une maladie ou d'un état de santé particulier, par exemple les personnes avec un stimulateur cardiaque, les femmes enceintes ou les personnes atteintes d'un cancer, doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.

• En cas de douleur musculaire ou articulaire pendant une période prolongée, cesser l'utilisation et consulter un médecin. Une douleur persistante pourrait être le symptôme d'un état de santé plus grave.

• Ne jamais utiliser de produits chauffants sur une plaie ouverte, une zone décolorée ou toute partie du corps enflée, brûlée, meurtrie, irritée ou dont la peau comporte des éruptions cutanées, des ulcères ou des varices.

• Ce produit ne doit jamais être utilisé par une personne souffrant d'une affection qui peut limiter ou entraver sa capacité à ressentir la partie du corps sur laquelle ce produit est utilisé..

• L'utilisation de ce produit devrait être agréable et confortable. En cas de douleur ou d'inconfort, cesser l'utilisation et consulter un médecin.

• S'assurer d'avoir les mains sèches au moment de manipuler les réglages ou de débrancher la fiche.

ASSEMBLAGE

Pour assembler le coussin chauffant, insérer complètement le coussin dans la housse en tissu en laissant le cordon à l'extérieur (Figure 4). Pour obtenir une chaleur humide, suivre les consignes de la section Traitement thermique humide.

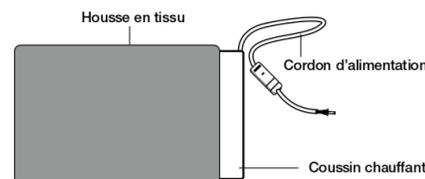


Figure 4

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais votre appareil si, au cours des 36 mois suivant la date d'achat, il présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service en vertu de la présente garantie, retournez le produit défectueux au centre de service indiqué au dos, accompagné du reçu de caisse et de 7,50 \$ pour les frais postaux et de manutention. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 36 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 36 MOIS PRÉVUE PAR CETTE GARANTIE ÉCRITE LIMITÉE.

EN AUCUN CAS, CONAIR N'ENGAGERA SA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU FORTUITS ATTRIBUABLES À L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CE SOIT.

La présente garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut également vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à une autre.

Conair Consumer Products ULC

SERVICE APRES-VENTE :

Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON
L4H 0L2
HP15RBWC

Pour en savoir plus sur les produits Conair, faits le :
1-855-926-6247

Visitez notre site Web :
www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels pour la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com

©2018 Conair Consumer Products ULC

MODE D'EMPLOI

TRAITEMENT THERMIQUE SEC

Ce coussin chauffant est préassemblé (Figure 4).

Ce produit possède une fiche polarisée (l'une des broches est plus grande que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche se branche sur une prise polarisée dans un sens seulement. Si la fiche ne se branche pas entièrement sur la prise, inverser la fiche. Si elle ne se branche toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne jamais tenter de contourner cette mesure de sécurité. Ce coussin chauffant est conçu pour un usage domestique seulement et pour fonctionner sur une prise à courant alternatif de 110-125 volts. Utiliser sur une prise à courant alternatif (60 hertz) seulement.

1. Brancher le cordon dans une prise à courant alternatif de 120 V.

2. Appuyer sur le bouton ON/OFF. Le témoin lumineux s'allumera pour indiquer que le coussin chauffant est au réglage Faible. Appuyer sur les boutons de réglage pour choisir le niveau (chaleur faible, moyenne ou élevée).

Choisir le réglage de la chaleur : FAIBLE, MOYENNE, ÉLEVÉE. Placer le coussin chauffant sur la zone à traiter.

4. Lorsque le traitement est terminé, appuyer sur le bouton ON/OFF pour éteindre le coussin et le débrancher. Pour un bienfait optimal, ne pas utiliser plus de 30 minutes à la fois.

Remarque : ce coussin chauffant possède une fonction d'arrêt automatique après 60 minutes. 5. Ne pas utiliser ou ranger le coussin chauffant dans une position pliée. Utiliser et ranger à plat.

Des brûlures peuvent se produire, peu importe le réglage. Vérifier fréquemment la peau sous le coussin.

Bouton On/Off

Témoins de réglage



BODY BENEFITS

par **CONAIR**



COUSSIN CHAUFFANT HUMIDE / SEC POUR TRÈS GRAND LIT

Des questions?

Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

MODE D'EMPLOI POUR TOUS LES MODÈLE HP15RBWC


Pour votre sécurité et un usage prolongé du produit, lisez toujours le livret d'instructions avant l'utilisation.

RESTRICTIONS D'UTILISATION DU COUSSIN CHAUFFANT

Pour plus de précautions, veuillez consulter les sections Importantes consignes de sécurité et Précautions.



Ne pas utiliser avec les enfants

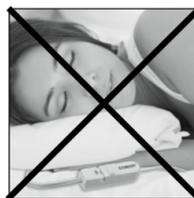

Ne pas dormir en utilisant le coussin chauffant



Ne pas utiliser le coussin chauffant dans un état plié



Ne pas utiliser sous une couverture



Ne pas s'asseoir sur le coussin chauffant



Ne pas plier ou froisser le coussin chauffant en le pressant



IB-15545

18CN033013