

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

NE PAS DÉTRUIRE

DANGER – Pour réduire le risque de brûlure, de décharge électrique ou de feu, ce produit doit être utilisé conformément aux consignes suivantes :

1. Lisez toutes les instructions.
2. **DÉBRANCHEZ TOUJOURS L'APPAREIL DE LA PRISE ÉLECTRIQUE IMMÉDIATEMENT APRÈS L'AVOIR UTILISÉ.**
3. N'utilisez pas l'appareil pendant le sommeil. Évitez de vous endormir en utilisant ce produit.
4. N'utilisez pas ce produit pour un enfant en bas âge ou un animal.
5. Cette compresse ne doit pas être utilisée pour ou par des personnes ayant certaines incapacités, par des personnes qui dorment ou sont inconscientes ou par des personnes ayant une mauvaise circulation sanguine, à moins qu'elles ne soient attentivement surveillées.
6. N'utilisez pas ce produit sur une partie de la peau affectée par une perte de sensation.
7. Une brûlure est possible malgré le réglage de la température. Surveillez fréquemment la peau sous la compresse.
8. N'utilisez jamais la compresse sans l'étui amovible.
9. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou là où on administre de l'oxygène.
10. N'utilisez pas d'aiguilles ou autre objet métallique pour maintenir la compresse en place.
11. Ne vous assoyez pas sur la compresse et évitez de la comprimer et de la plier fermement.
12. Ne tire jamais sur la compresse par le cordon électrique.
13. N'utilisez pas le cordon comme poignée.
14. Examinez soigneusement l'intérieur de l'étui ainsi que le cordon avant chaque utilisation. Jetez la compresse si l'intérieur de l'étui ou le cordon présente des signes de détérioration.
15. Ne modifiez cette compresse d'aucune façon. Aucune pièce ne peut être réparée par l'utilisateur. Si, pour une raison quelconque, cette compresse ne fonctionne pas de façon satisfaisante, retournez-la à un centre de service autorisé à l'adresse indiquée.

TRAITEMENT PAR LE FROID

1. Assurez-vous de retirer la compresse chauffante de l'enveloppe.
2. Faites refroidir la compresse de gel comme vous le désirez.
3. Insérez la compresse de gel dans l'enveloppe.
4. Posez le tout sur la partie à traiter.
5. Après l'utilisation, faite sécher l'enveloppe avant de la ranger.

Remarque : Pendant l'utilisation, vérifiez fréquemment la peau sous l'enveloppe. Après l'utilisation, faite sécher l'enveloppe avant de la ranger..

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

L'enveloppe pour la compresse chauffante et la sangle sont lavables à la main, à la machine séparément, ou dans un sac afin d'empêcher qu'ils ne s'abîment ou qu'ils n'abîment d'autres vêtements. Avant de les laver, retirez la compresse chauffante ou la compresse de gel et fixez les crochets aux attaches en boucles sur chaque pièce afin d'empêcher qu'ils n'abîment l'enveloppe ou la sangle pendant le lavage. Faites sécher à l'air ambiant l'enveloppe et la sangle; ne les faites pas sécher par culbutage.



16. N'utilisez pas cette compresse avec un liniment, un baume ou un onguent qui contient des ingrédients produisant de la chaleur, car cela risquerait de brûler la peau. Utilisez-la là où l'application de la chaleur peut apporter un confort personnel et lorsque votre médecin ou votre dentiste la recommande pour le soulagement d'une douleur.
17. Enroulez le cordon librement pour ranger la compresse, car si vous le serrez, cela pourrait l'endommager ainsi que des pièces intérieures.
18. Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes.
19. Posez la compresse sur et non sous la partie du corps qui nécessite de la chaleur.
20. Ne mettez pas cette compresse dans le micro-ondes.
21. Ne laissez pas la compresse sans surveillance, particulièrement en la présence d'enfants.
22. N'utilisez pas la compresse sous une couette de lit ou autre type de couverture. Ne mettez pas de draps ou de couvertures sur la compresse. N'utilisez que l'étui fourni pour recouvrir la compresse.
23. N'utilisez pas la compresse sur une peau sensible ou si vous prenez des médicaments qui peuvent prendre la peau sensible.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARTIES DE LA COMPRESSE CHAUFFANTE

- Enveloppe et sangle lavables à la machine (Figure 1)
- Compresse chauffante (Figure 2)
- Compresse de gel froide (Figure 3)



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

UTILISATIONS RESTREINTES DE LA COMPRESSE CHAUFFANTE

Pour en savoir plus sur les mises en garde, veuillez consulter les sections Consignes importantes de sécurité et Mises en garde.



Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.



Ne l'utilisez pas sous des couvertures.



Ne dormez pas en utilisant la compresse chauffante.



Ne vous assoyez pas sur la compresse chauffante.



Ne comprimez pas la compresse chauffante.



Ne la pliez pas fermement.

Mises en garde :

- **Ce produit n'est pas doté d'une fonction d'arrêt automatique. Mettez l'interrupteur à la position "0" une fois l'utilisation terminée.**
- L'étui en tissu doit toujours être utilisé avec la compresse chauffante.
- Cette compresse chauffante ne doit pas être utilisée dans les cas suivants : si vous souffrez de diabète, de tuberculose, de tumeurs bénignes ou malignes, d'une phlébite ou d'une thrombose, si vous avez des hémorragies, des inflammations de la peau, un douleur indéterminée aux mollets ou à des jointures ou si votre circulation sanguine est mauvaise. Consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil si vous avez une infection fongique, une enflure, une fracture ou une douleur persistante.
- **Consultez votre médecin si vous avez des questions concernant l'utilisation de la compresse chauffante à des fins thérapeutiques.**
- Ne l'utilisez pas sur toute douleur inexpiquée, sur tout muscle endolori ou à la suite d'une blessure musculaire grave, avant d'avoir préalablement consultez votre médecin.
- **Gardez-la hors de la portée des enfants.**
- Cessez d'utiliser le produit si la douleur augmente ou s'il y a enflure après l'application.
- N'utilisez pas la compresse dans le bain ou sous la douche. Ne l'utilisez que dans un endroit sec.
- Consultez votre médecin avant d'utiliser la compresse si vous souffrez d'une maladie ou avez des troubles médicaux incluant, notamment, le recours à un stimulateur cardiaque, une grossesse ou un cancer.
- Cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin si vous éprouvez de la douleur à un muscle ou à une articulation pendant une période prolongée. Une douleur persistante pourrait être un symptôme d'un problème plus sérieux.
- N'utilisez jamais un produit chauffant sur une plaie ouverte, une peau marbrée ou toute partie du corps qui est enflée, brûlée, contusionnée, irritée ou sur une éruption cutanée, une plaie ulcérée ou des varices.
- Ce produit ne doit jamais être utilisé par des personnes souffrant de malaises qui pourraient limiter ou même empêcher l'utilisateur de ressentir ou d'éprouver une sensation à l'endroit sur le corps où le produit est utilisé.
- L'utilisation de ce produit est censée être plaisante et agréable. En cas de douleur ou d'inconfort, cessez l'utilisation et consultez votre médecin.

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 36 mois sui-vant la date d'achat, si le produit affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiquée ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 36 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 36 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :
Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario, L4H 0L2.
1-855-926-6247
©2016 Conair Consumer Products ULC
www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com

16CN022711

- Assurez-vous d'avoir les mains sèches au moment d'utiliser les réglages ou en retirant la fiche de la prise.


ASSEMBLAGE

Pour assemble la compresse chauffante, insérez complètement la compresse chauffante dans l'étui en tissu, en maintenant le cordon électrique à l'extérieur de l'étui en tissu. Mettez les trous sur la compresse chauffante vis-à-vis les boutons sur l'étui et pressez ces derniers pour fixer la compresse chauffante en place. Branchez l'adaptateur sur une prise murale et insérez la prise femelle à CC de l'adaptateur dans la commande manuelle.

CONSIGNES D'UTILISATION

TRAITEMENT PAR LA CHALEUR

1. Branchez-la sur une prise électrique murale de 120V CA.
2. Mettez l'interrupteur à "I". Le voyant d'alimentation s'allumera pour indiquer que la compresse chauffante est en marche.
3. Mettez l'interrupteur à un des réglages de chaleur faible ou élevée. Commencez par le réglage "I" avant de passer au réglage "II".
4. Posez la compresse chauffante sur la partie du corps à traiter. Pour les partie plus petites telles que les genoux, enveloppez la partie à l'aide de la compresse et maintenez-la en place à l'aide de crochet et de l'attache à boucle. Pour le traitement des plus grandes parties du corps telles que le dos, utilisez la sangle de façon que la compresse puisse recouvrir la plus grande surface possible et que vous puissiez la fixer en place.
5. Une fois le traitement terminé, mettez l'interrupteur à "0" et débranchez l'appareil. Remarque : Ce produit n'est pas doté d'une fonction d'arrêt automatique. no se apaga automáticamente.

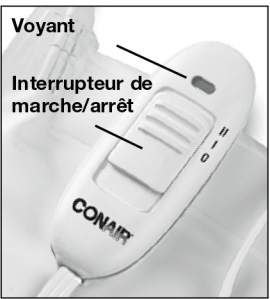

BODY BENEFITS[®]

par **CONAIR**

COMPRESSE CHAUFFANTE POUR VIE ACTIVE



DES QUESTIONS?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

APPELEZ-NOUS D'ABORD!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247
Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Livret d'utilisation Modèle HP09C

Afin que ce produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours attentivement le livret d'instructions avant de l'utiliser.

IB-14548